



## ACCUVAC Lite

Einfach stark – Absaugung leicht gemacht

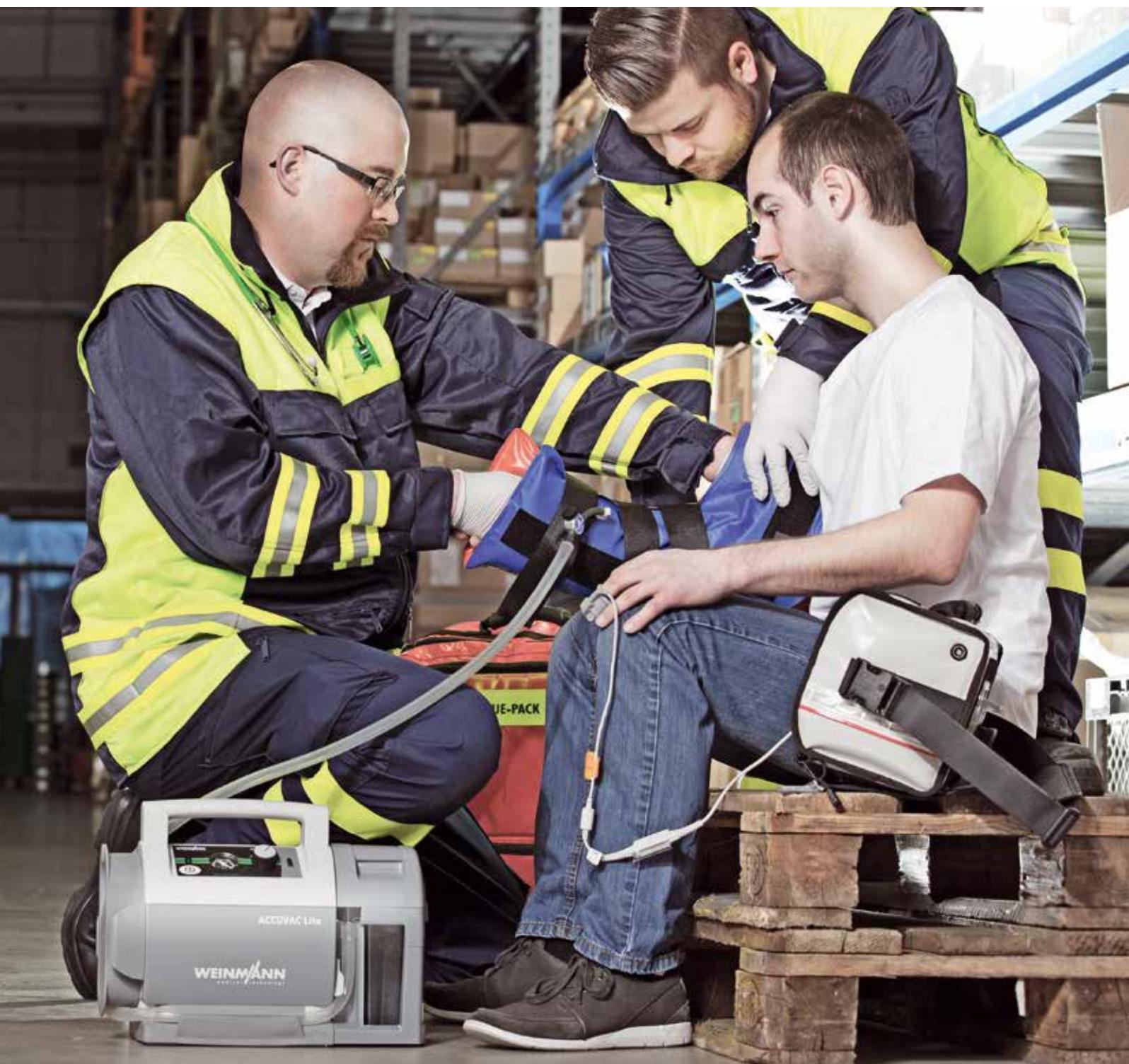

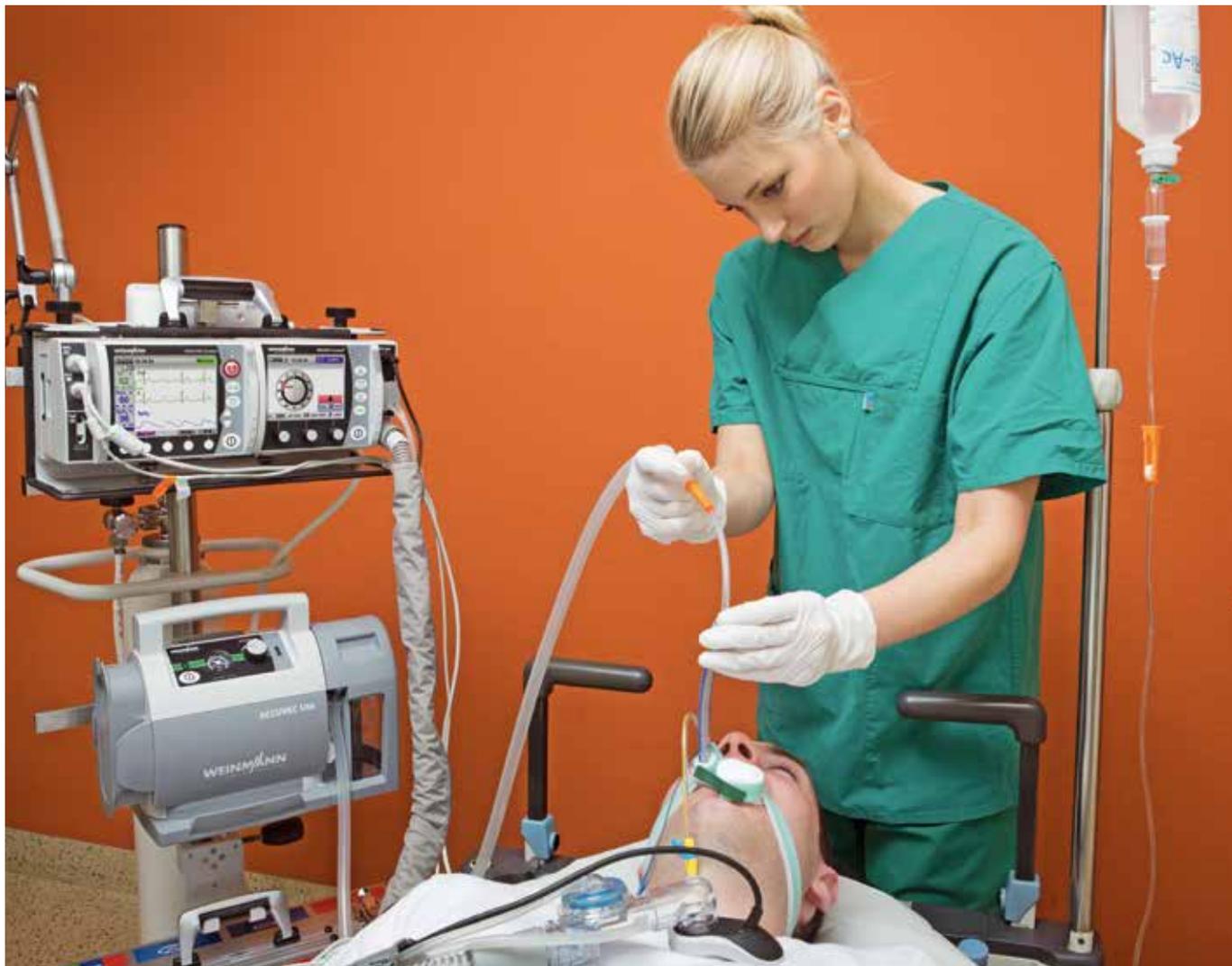

## ACCUVAC Lite

### Absaugung leicht gemacht

Die Atemwege schnell und effektiv freizuhalten ist in Notfallsituationen überlebenswichtig. ACCUVAC ist seit Jahrzehnten der Standard für Atemwegsabsaugung. Bei der Absaugung des Mund- und Rachenraumes eines Patienten bzw. bei einer endotrachealen oder bronchialen Absaugung sorgt ACCUVAC Lite für freie Atemwege. Die hohe Saugleistung und einfache Handhabung garantieren eine schnelle und effektive Therapie im Notfalleinsatz oder in der Klinik.

### Breites Einsatzgebiet, flexible Handhabung

Der Unterdruckbereich der ACCUVAC Lite kann durch den leicht bedienbaren Vakuumregler stufenlos eingestellt und angepasst werden. Damit kann sie sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und Kleinkindern angewendet werden. Neben der Absaugung der Atemwege kann ACCUVAC Lite auch für die Evakuierung von Vakuumschienen und -matratzen eingesetzt werden.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Variabel einsetzbar
- Sicher und hygienisch
- Intuitiv bedienbar und robust
- EN 1789-konforme, sichere Unterbringung mit Wandhalterung im Fahrzeug



## Komfortable Anwendung, großes Einsatzspektrum

- Hohe Saugleistung von ca. 26 l/min bei -0,8 bar (am Geräteeingang)
- Stufenlos einstellbare Unterdruckregulierung durch leicht bedienbaren Vakuumregler bis -0,8 bar
- Unterdruck am Manometer ablesbar
- Sichere Sekretaufnahme durch autoklavierbaren Mehrwegsekretbehälter mit Einweg-Bakterienfilter und Überlauf-sicherung bzw. Einweg-Absaugbeutel Serres® mit integriertem Bakterienfilter
- Akkuwechsel: Einfach, von außen und ohne Werkzeug durch den Anwender möglich
- Robustes Gehäuse aus stoßsicheren Materialien
- Kippsicher durch niedrigen Schwerpunkt

## Optimale Bedienbarkeit im Rettungsalltag

- Optimale Unterbringung des Absaugschlauchs in seitlicher Schlauchhalterung
- Einhand-Entriegelung per Tastendruck aus der Wandhalterung
- Kompatibel mit bereits bestehender ACCUVAC-Wandhalterung
- Optional mit großer Zubehörtasche, Schutztasche und/oder Tragegurt

## Für jeden Patiententyp und jeden Einsatz

- Absaugen von Sekret und Nahrungsbestandteilen
- Endotracheale und bronchiale Absaugung
- Für den Einsatz bei Kleinkindern, Kindern und Erwachsenen geeignet
- Evakuierung von Vakuumschienen und -matratzen



### ACCUVAC Lite

mit Mehrbehältersystem, Wandhalterung, Zubehörtasche und 12-V-Verbindungsleitung



### ACCUVAC Lite


mit Einwegbehältersystem, Wandhalterung, 12-V-Verbindungsleitung und Schutztasche

 Service Hotline  
040 88 18 96 122

## Servicedaten: ACCUVAC Lite

Herstellergarantie	2 Jahre
STK Intervall	STK-frei
Wartungsintervall	wartungsfrei
Funktionskontrolle	manuell
Akuwechsel	einfach, von außen, ohne Werkzeug
Akku	wartungsfrei, keine Kalibrierung notwendig
Umrüstung Einwegsystem/ Mehrwegsystem	einfach, ohne Werkzeug

# Intuitive Bedienung für höchste Sicherheit

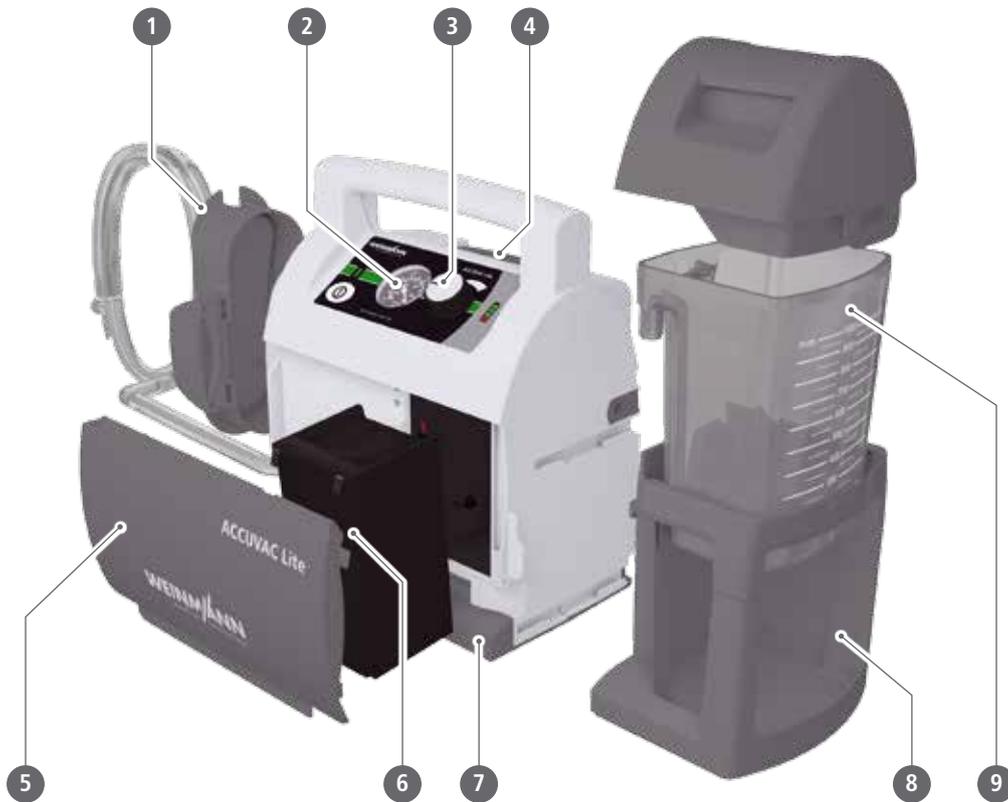

## **1. Schlauchaufwicklung**

Zur optimalen Unterbringung

## **2. Manometer**

Zum Ablesen des Unterdruckes

## **3. Leicht bedienbarer Vakuumregler**

Stufenlos einstellbare Unterdruckregulierung

## **4. Entriegelung für Wandhalterung**

Einhand-Entriegelung per Tastendruck

## **5. Akkufachabdeckung**

Ohne Werkzeug zu öffnen. Somit ist der Akku schnell erreichbar und auswechselbar

## **6. Bleiakku**

Schnelle Aufladung für Akkustatus bis 80%

## **7. Gerätefuß mit Schlauchführung**

## **8. Behälteraufnahme**

Mehr Sicherheit für alle Behältersysteme aufgrund stoßsicherer Materials

## **9. Mehrwegsekretbehälter, 1000 ml**

Mit Überlaufschutz durch Einweg-Bakterienfilter. Ist der Behälter voll, stoppt die ACCUVAC Lite die Absaugung.



# Technische Daten

## ACCUVAC Lite

Produktklasse nach Richtlinie 93/42/EWG	Ila
RoHS-Konformität nach Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II)	Ja
Klassifikation nach EN ISO 10079-1	High vacuum/high flow
Angewandte Normen	EN 60601-1, EN ISO 10079-1, EN 1789, EN 60601-1-11, EN 60601-1-12, RTCA DO-160 G
Abmessungen (B x H x T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>mit Behältersystem 370 x 277 x 146 mm</li> <li>mit Behältersystem und Zubehörtasche 370 x 277 x 152 mm</li> </ul>
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerät mit Akku, ohne Behältersystem und Aufnahme 4,6 kg</li> <li>Mehrwegbehältersystem mit Aufnahme für Mehrwegbehältersystem 1,00 kg</li> <li>Einwegbehältersystem mit Aufnahme für Einwegbehältersystem 0,65 kg</li> </ul>
Betrieb: Temperaturbereich	-5 °C bis +50 °C
Transport/Lagerung	-40 °C bis +70 °C
Maximale Stromaufnahme	4,3 A
Nennspannung	12 V DC nominal (min. 10 V, max. 15 V)
Saugleistung am Geräteeingang (ohne Behältersystem) bei -0,8 bar, vollem Akku und 21 °C/1013 hPa	26 l/min
Saugleistung am Eingang Mehrwegbehältersystem bei -0,8 bar, vollem Akku und 21 °C/1013 hPa	23 l/min
Vakuumeinstellung	Über stufenlosen Vakuumregler
Betriebsart	S2 45 min
Schutzgrad	IP34D
Akku-Typ	Blei
Akku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ladezeit Akkustatus 80 %: 2 h 75 min</li> <li>Akkustatus 100 %: 14 h</li> <li>Lebensdauer Ca. 400 Ladezyklen</li> <li>Akkubetriebsdauer 40 min (bei ununterbrochenem Betrieb mit vollem/neuem Akku)</li> </ul>
Sekretbehälter-Volumen	1000 ml
Mehrweg-Absaugschlauch	10 mm ID, 1300 mm Länge
Einweg-Absaugschlauch	7 mm ID, 1800 mm Länge

**CE 0124**

Zertifiziertes  
QM-System nach  
EG-Richtlinie 93/42/EWG, Anh.II  
(EN ISO 9001:2008/EN ISO 13485)

Technische Angaben und  
Änderungen vorbehalten.

 Designed in Germany

Wählen Sie Ihre Wunschkombination der ACCUVAC Lite – abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse:



**ACCUVAC Lite mit  
Einwegbehältersystem,  
WM 11705**

**ACCUVAC Lite mit  
Mehrwegbehältersystem\*,  
WM 11700**



**ACCUVAC Lite mit  
Einwegbehältersystem  
und Zubehörtasche,  
WM 11745**

**ACCUVAC Lite mit  
Mehrwegbehältersystem\*  
und Zubehörtasche,  
WM 11740**

Kombinieren Sie Ihre ACCUVAC Lite mit zusätzlichem Zubehör von Seite 6

\*Bitte beachten Sie, dass das Mehrwegbehältersystem mit einem Einweg-Bakterienfilter ausgestattet ist

# Zubehör und Ersatzteile

## Zubehör

- |  |            |
|--|------------|
| <b>1.</b> Schutztasche<br>(nicht kombinierbar mit Zubehörtasche)   | WM 11692   |
| <b>2.</b> Tragegurt  | WM 11693   |
| <b>3.</b> 12-V-Verbindungsleitung  | WM 10650   |
| <b>4.</b> Netz- und Ladegerät<br>für 100 V bis 240 V Wechselspannung auf<br>Gerätestecker ACCUVAC, inkl. Netzanschlussleitung<br>nach EN 50075 („Europastecker“) | WM 2620    |
| <b>5.</b> Wandhalterung für ACCUVAC zur direkten<br>Wandmontage, inklusive Montageset  | WM 15208   |
| <b>6.</b> Halblech für Geräteschiene   | WM 15845   |
| <b>7.</b> Anbauset Krankenhausnormschiene<br>mit zwei Adaptern   | WM 15805   |
| <b>8.</b> Wandhalterung für Netz- und Ladegerät  | WM 15844   |
| <b>9.</b> Anbauset Stangenhalterung<br>Ø 19 mm - 40 mm   | WM 15806   |
| <b>10.</b> Umrüstsatz Mehrwegbehältersystem<br>bestehend aus:  | WM 17820   |
| - Set, Mehrwegbehältersystem (WM 17821)  |            |
| - Aufnahme für Mehrwegbehältersystem (WM 11654)  |            |
| <b>11.</b> Umrüstsatz Einwegbehältersystem<br>bestehend aus:   | WM 17825   |
| - Aufnahme für Einwegbehältersystem (WM 11754)   |            |
| - Vakuumschlauch für Behälter Serres® (WM 11761)   |            |
| - Sekretbehälter Serres®, komplett (WM 10790)  |            |
| <b>12.</b> Umrüstsatz Zubehörtasche,<br>bestehend aus:   | WM 17839   |
| - Akkufachabdeckung für Zubehörtasche  | (WM 11714) |
| - Zubehörtasche  | (WM 11691) |

## Verbrauchsmaterial

- |   |          |
|---|----------|
| <b>13.</b> Absaugbeutel Serres®<br>1000 ml, mit hydrophobem Filter und<br>Geliermittel (Verpackungseinheit: 32 Stück im Karton)   | WM 17800 |
| <b>14.</b> Einweg-Absaugschlauch mit Fingertip<br>für die Verwendung mit dem Einwegsystem,<br>180 cm Länge, 7 mm ID, auch erhältlich<br>in Sets à 10, 20, 32 und 50 Stück | WM 10778 |
| <b>15.</b> Mehrweg-Absaugschlauch<br>130 cm Länge, 10 mm ID, auch erhältlich in<br>Sets à 10, 20 und 50 Stück   | WM 10662 |
| <b>16.</b> Fingertip für Mehrweg-Absaugschlauch<br>10 mm ID auch erhältlich in<br>Sets à 10, 20 und 50 Stück  | WM 10666 |
| <b>17.</b> 10er-Set Einweg-Bakterienfilter<br>für Mehrwegsekretbehälter   | WM 17830 |

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17





## Ersatzteile für Mehrwegsystem

1. Oberteil des Sekretbehälterdeckels,	WM 11657
2. Filterhalter	WM 11661
3. O-Ring für Filterhalter	WM 11663
4. Bakterienfilter	
5. Unterteil des Sekretbehälterdeckels	WM 11658
6. Schwimmerkugel	WM 11662
7. Mehrwegsekretbehälter 1000 ml	WM 11653
8. Mehrweg-Absaugschlauch 10 mm ID	WM 10662
9. Fingertip für Mehrweg-Absaugschlauch 10 mm ID	WM 10666
10. Aufnahme für Mehrwegbehältersystem	WM 11654
Sekretbehälterdeckel, komplett bestehend aus den Ersatzteilen 1 – 6	WM 17822
Set, Mehrwegbehältersystem bestehend aus den Ersatzteilen 1 – 9	WM 17821
Umrüstsatz Mehrwegbehältersystem bestehend aus den Ersatzteilen 1 – 10	WM 17820

## Ersatzteile für Einwegsystem Serres®

Sekretbehälter Serres®, komplett bestehend aus:	WM 10790
• Sekretbehälter, 1000 ml (WM 10775)	
• Absaugbeutel	
• Einweg-Absaugschlauch mit Fingertip (WM 10778)	
Sekretbehälter Serres®, 1000 ml	WM 10775
Vakuumschlauch für Sekretbehälter Serres®	WM 11761
Aufnahme für Einwegbehältersystem	WM 11754
Set Einwegbehältersystem bestehend aus:	WM 17826
• Vakuumschlauch für Sekretbehälter Serres® (WM 11761)	
• Sekretbehälter Serres®, komplett (WM 10790)	
Winkelstück am Sekretbehälter Serres®, Mehrweg	WM 10799

## Ersatzteile für ACCUVAC Lite

Set Entriegelungstaste	WM 17837
Bleiakku	WM 10747
Akkufachabdeckung (ohne Ösen für Zubehörtasche)	WM 11704
Schlauchaufwicklung	WM 11664
Gerätefuß	WM 11677

## Simply Professional

WEINMANN Emergency ist ein international tätiges Medizintechnik-Unternehmen in Familienbesitz. Mit unseren mobilen Systemlösungen für die Bereiche Notfall-, Transport- und Katastrophenmedizin setzen wir Maßstäbe beim Retten von Menschenleben. In engem Austausch mit Profis aus Rettungsdiensten, Kliniken und Sanitätsdiensten von Armeen entwickeln wir innovative Medizinprodukte rund um die Beatmung und Defibrillation. Seit über 100 Jahren bieten wir unseren Kunden ein Höchstmaß an Verlässlichkeit, Erfahrung und Qualität made in Germany.

### Hauptsitz

WEINMANN Emergency  
Medical Technology GmbH + Co. KG  
Frohbosestraße 12  
22525 Hamburg  
Germany

T: +49 40 88 18 96-0      Zentrale  
F: +49 40 88 18 96-480    Zentrale  
T: +49 40 88 18 96-120    Kundenservice  
T: +49 40 88 18 96-122    Technischer Service  
E: [info@weinmann-emt.de](mailto:info@weinmann-emt.de)

### Zentrum für Produktion, Logistik und Service

WEINMANN Emergency  
Medical Technology GmbH + Co. KG  
Siebenstücken 14  
24558 Henstedt-Ulzburg  
Germany

### China

Weinmann (Shanghai) Medical Device Trading Co. Ltd.  
T: +86 21 52 30 22 25 • [info@weinmann-emt.cn](mailto:info@weinmann-emt.cn)

### V.A.E.

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co.KG (Branch)  
T: +971 432 100 31 • [info-dubai@weinmann-emt.com](mailto:info-dubai@weinmann-emt.com)

### Frankreich

WEINMANN Emergency France SARL – Paris-Igny  
T: +33 1 69 41 51 20 • [info@weinmann-emt.fr](mailto:info@weinmann-emt.fr)

### Russland

Weinmann SPb GmbH – St. Petersburg  
T: +7 812 633 30 82 • [info@weinmann-emt.ru](mailto:info@weinmann-emt.ru)

### Singapur

Weinmann Singapur PTE, Ltd.  
T: +65 65 09 44 30 • [info-singapore@weinmann-emt.sg](mailto:info-singapore@weinmann-emt.sg)

### Spanien

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG  
T: +34 91 79 01 137 • [info-spain@weinmann-emt.es](mailto:info-spain@weinmann-emt.es)